


# KSM 40

## Autopsie- und Orthopädiesäge



- *Hygienische Handhabung durch einfache Reinigung, Desinfektion und Sterilisation ohne Abbau der Säge*
- *Keine Staub- oder Spritzbelästigung*
- *Flexibler Einsatz durch Verwendung unterschiedlicher Sägeblätter*
- *Ergonomisch geformt und extrem lauffleise*

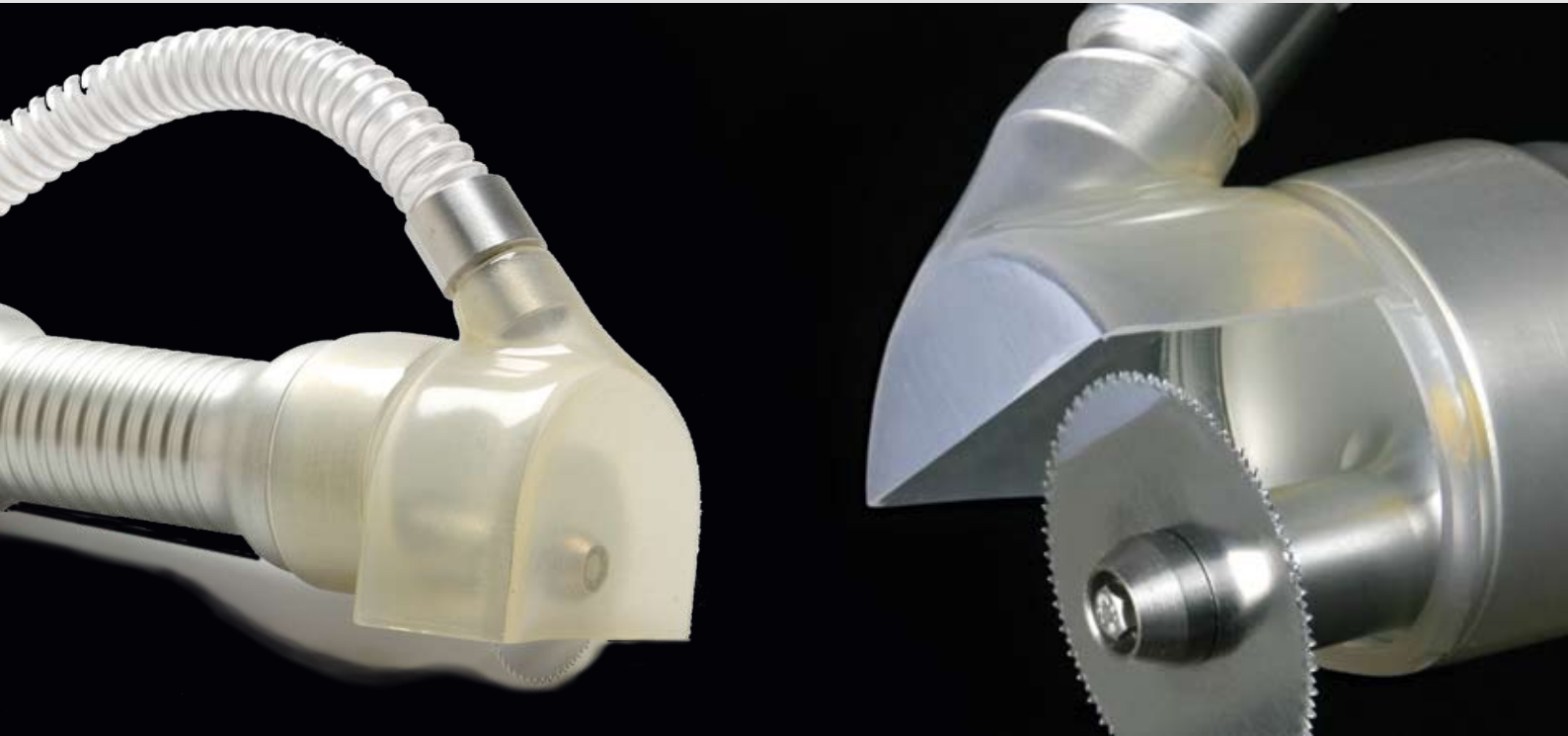



## Absaugeinheit

Die sehr kompakt gebaute Absaugeinheit verfügt über ein sehr effizientes, dreistufiges Filtersystem aus Papier-, Textil- und Patronenfilter, das Partikel bis zu einer Größe von 0,6 Mikron absorbiert. Durch das Unterdruckprinzip der Absaugeinheit kann der Papierbeutel ohne Entleerung des Inhalts ausgetauscht werden. Anwendungsgebiete sind trockene bzw. teilweise feuchte Materialien. Das Absaugen von Flüssigkeiten ist nicht möglich. Tropfwassergeschützt nach IPX1. Beutelinhalt: 7 Liter

## Filter-Servicevertrag, jährlich

Vereinfachen Sie sich die Nachbestellung von Filtern. Lieferumfang des verlängerbaren Servicevertrags:

- 50 Papierfilter
- 1 Textilfilter
- 1 Mikronfilter
- 5 Absaughauben
- 1 Saugschlauch

Weitere Lieferung nach 6 Monaten:

- 50 Papierfilter
- 1 Textilfilter
- 1 Mikronfilter

Diese Bezugsmethode ermöglicht eine erhebliche Einsparung gegenüber dem Einzelbezug der Komponenten.



## Ersatzteile

Sägeblatt Vollkreis, 64 mm, für Autopsie, 10er Pack

Das beliebteste Sägeblatt für die meisten Anwendungen in der Autopsie. Die grobe Verzahnung reduziert das Blockieren auf ein Mindestmaß. Mit Vierpunkt-Halterung zur sicheren Befestigung. Kann in neue Position gedreht werden, wenn ein Sägenabschnitt stumpf wird.



Sägeblatt Vollkreis, 64 mm, für Gips, 10er Pack

Eine feinere Verzahnung sorgt für präziseres Arbeiten und geringere Rutschgefahr. Kann für höhere Ausnutzung gedreht werden.



Sägeblatt Vollkreis, 76 mm, für Autopsie, 10er Pack

Ein größeres Sägeblatt für größere Arbeitstiefe. Die grobe Verzahnung reduziert das Blockieren auf ein Mindestmaß. Kann für höhere Ausnutzung gedreht werden.



Sägeblatt 51 mm, Segment, 10er Pack

Ein Segment-Sägeblatt für Feinarbeiten in speziellen Umgebungen.

## Servicekit

Enthält alle Teile zum Betrieb des Geräts:

- 50 Papierfilter
- 1 Textilfilter
- 1 Mikronfilter
- 10 Absaughauben
- 1 Saugschlauch



## Sägeblattaufnahme-Kit

Zur einfachen Demontage der Sägeblätter. Lieferumfang:

- Sechskant-Steckschlüssel
- Sicherungsschraube
- Sägeblattaufnahme
- Federring



## Serviceaustausch Handstück/Ersatzteil

Wir bieten den Ersatz des alten Handstücks durch ein neues oder auf Wunsch die Lieferung eines Reservegeräts.

## Verlängerungskit für Säge

Entfernung (max.): 4 m

# KSM 40

## Autopsie- und Orthopädiesäge



### Technische Daten:

Stromversorgung

Transformator (Norm):

BS 415

Ausgangsspannung (Säge):

40 V Gleichspannung

Gehäuse (Normen):

BS 5490, IEC 529, DIN 40050,  
Schutzklasse: IPX5

Absicherung:

Elektronische Schutzschaltung  
mit Doppelsicherung

Gehäuse (Normen):

BS 5724 und IEC 601

Gewicht:

1,7 kg

Eingangsspannung:

230 V oder 110 V

Kabellänge (montiert):

4,0 m

Absaugereinheit

Motorleistung:

750 W

Beutelinhalt:

7,0 Liter

Saugleistung (max.):

90 l/s

Wassersäule (max.):

1650 mm WG

Filterleistung:

99,997 % bei 0,6 Mikron (mit Zert. n. BS 3928)

Abmessungen:

Höhe: 760 mm (mit Gestell)

Durchmesser:

225 mm

Gewicht:

11,5 kg

Handstück

Motor:

Gleichstrom, Dauermagnet

Schwingungen:

12000/min (Leerlauf)

Spannung:

40 V Gleichspannung/0,75 A

(Leerlauf) Last (typ.):

1,5 A

Aufbau:

Aluminiumgehäuse anodisiert, Sägenantrieb vierfach gelagert

Schutzklasse:

IPX7

Geräuschpegel:

37 dB(A), ohne Sägeblatt

Gewicht:

1,4 kg

05-2009 / Technische Änderungen vorbehalten.

**MEDITE** 

**MEDITE GmbH**

Wollenweberstr. 12

D-31303 Burgdorf/Germany

Tel. +49 (0) 51 36/88 84-0

Fax +49 (0) 51 36/88 84-55

[www.medite.de](http://www.medite.de)

Ihr kompetenter Vertriebspartner: